

QUICKIE®

Familia de Rotación Espacial

Un nivel superior en innovación, ajuste y calidad en la tecnología de rotación espacial



Quickie® IRIS™



40° o 55° of de Rotación Inteligente en el Espacio

- El marco del asiento rota en torno al centro de gravedad del usuario
- Diseño de rotación suave y balanceado, que ayuda a los usuarios a permanecer cómodos y seguros durante la basculación
- Mínimo esfuerzo requerido por el cuidador para operar la rotación
- NUEVO diseño en el riel de la basculación minimiza los movimientos laterales e incluye un cobertor para prevenir que suciedad o desechos se acumulen en el sistema



Base compacta y tubos de respaldo plegables

Portabilidad

- Con 39 libras, es una de las sillas de ruedas de basculación espacial más livianas del mercado
- Su base compacta mejora la maniobrabilidad
- Tubos de respaldo plegables permiten un fácil transporte

Ajustes para óptima Rotación y Estabilidad

- El marco del asiento se ajusta de manera horizontal para alinear el Centro de Gravedad (CG) con el Centro de Rotación (CR) para una rotación más intuitiva y balanceada
- La base se ajusta de manera horizontal para proveer la estabilidad delantera necesaria
- Rueda trasera y anti vuelcos se ajustan en conjunto con la base para brindar estabilidad trasera
- Con unas pocas medidas del usuario final podemos optimizar la alineación del CG-CR, mediante la configuración "profundidad por medio de Quickie"



Opciones y Características

- Diseño de apoya piernas mejorado con una intuitiva palanca de liberación y un mecanismo de bloqueo cónico para un ajuste seguro con el paso del tiempo
- NUEVOS apoya piernas elevables y articulados que mejoran la alineación de la articulación de la rodilla con el punto pivote en los apoya piernas y un sistema de "clics" audibles a través del rango de movimiento
- Opción de tubos de asiento ajustables en ancho para permitir ajustes de acuerdo a las necesidades del usuario
- Respaldo dinámico opcional que controla el movimiento del respaldo para mantener un posicionamiento adecuado y reducir daños al equipo como resultado de movimientos involuntarios
- Pensando en los cuidadores: Agarradera de angulación ajustable en altura, basculación mediante el pie y freno a pedal



Tubos de ancho de asiento ajustables




Vídeo acerca del soporte de la
pierna en la Quickie IRIS



Nueva opción de MONO Backrest System™

- Single post backrest system
- Permite que el ancho del respaldo se seleccione de manera independiente al ancho del asiento, para ajustarse a usuarios con troncos más anchos o más angostos
- Elimina la interferencia entre los tubos y los anclajes del respaldo, de manera que los soportes de tronco pueden colocarse sin interferencias a todo lo largo del respaldo
- Mejora el rango de movimiento para la propulsión independiente
- Permite 2" de ajuste a la izquierda y/o a la derecha
- Con opción de respaldo dinámico para controlar el movimiento de la espalda
- Ofrece 35° de inclinación y se pliega para su fácil transporte

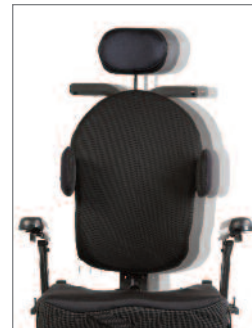

Ajuste lateral del respaldo



Video de sistema de respaldo MONO

Quickie® SR45™

45° de Rotación Inteligente en el Espacio

- Utiliza en riel de basculación de la Quickie Iris para una rotación suave, balanceada y sin requerir esfuerzo por parte de los cuidadores.
- Ofrece las mismas capacidades de ajuste y configuración de la Quickie IRIS

Mezcla de opciones inteligentes

- Opciones que incluyen los apoyabrazos, ruedas delanteras, traseras, anchos y profundidades de asiento ordenados con mayor frecuencia
- Nuevo apoyapierna abatible hacia adentro y/o hacia afuera con un diseño de ajuste simple y un intuitivo sistema de liberación
- Nuevo diseño de apoyabrazos de doble soporte



Especificaciones del Producto

ESPECIFICACIONES	QUICKIE IRIS	QUICKIE SR45
Códigos HCPCS (solo para clientes de USA)	E1161	E1161
Peso	39 lbs.	39 lbs.
Capacidad de peso	250 lbs. (Estándar) 350 lbs. (Sobre Peso)	265 lbs.
Anchos de asiento	14" - 22"	14" - 20"
Profundidades de asiento	14" - 22"	14" - 22"
Alturas de asiento anterior	12.5" - 19.5"	14" - 20.5"
Ajuste en ángulo de respaldo	-30° a 5°	-30° a 5°
Grados de Basculación	-5° a 35° -5° a 50° 0° a 40° 0° a 5° +5° a 45° +5° a 60°	0° a 45°
Opción de Tránsito	Si*	Si

* De acuerdo con los estándares WC-19 de ANSI/RESNA. Más información en www.sunrisemedical.com



Personalización de Productos

Nuestro equipo de Built-4-Me (construido para mi) se dedica a la creación de productos personalizados, más allá de lo que se encuentra en nuestras hojas de pedido. Expertos en ingeniería y fabricación de productos de rehabilitación escucharán sus necesidades específicas y construirán una silla tan única como sus huellas digitales!

Personalizaciones en la familia de sillas basculantes

- Respaldo Dinámico
- Paneles de aluminio personalizados
- Agarraderas únicas ajustables en altura
- Soportes para ventiladores de medidas especiales
- Soportes para tanques de Oxígeno

NUESTRA SOLUCION COMPLETA DE POSICIONAMIENTO



1
Combinamos 11 años de tecnología de rotación inteligente en el espacio



2
con una inmensa variedad en opciones de posicionamiento con el MONO Backrest System™



3
y un útil y extenso portafolio de soportes para posicionamiento JAY

Puede ordenar el sistema totalmente integrado y compatible compuesto de Quickie IRIS, el MONO Backrest System™ y accesorios de posicionamiento JAY y ser ensamblados en nuestra planta. Nuestra solución completa posicionamiento ofrece la tecnología más moderna, una fácil configuración, y la eficacia clínica de que usted espera de Quickie y JAY.



JAY® SureFit™

- Mezcla simple e inteligente de sistemas de posicionamiento personalizados
- Sistema de tránsito WC-20. Aprobado y compatible*
- Puede ordenarlo con sillas Quickie y ser enviado junto con la base

* Cumplimiento de tránsito WC-20 cuando se usa en conjunto con una base que cumpla con WC-19.

JAY® ConfigureFit™

- Solución integral y personalizada
- Sistema de tránsito WC-20. Aprobado y compatible*
- Hoja de pedido intuitiva, acorde con la evaluación clínica para reducir omisiones y maximizar la justificación para financiamiento (especialmente dentro de EEUU)



COJINES JAY®



Union™
E2307, E2608



J2™ / J2 DC
E2622, E2623,
E2624, E2625



Fusion™
E2622, E2623



J3™
E2622, E2623
E2624, E2625

RESPALDOS JAY®



J3™ Posterior
E2613



J3™ Posterior & Lateral
E2615



J3™ Posterior & Deep Lateral/Contour
E2620